



Qufora® Hilfsmittel
für die ableitende
Inkontinenzversorgung

A middle-aged man with grey hair and a beard, wearing black-rimmed glasses and a grey sweater, is sitting on a striped sofa. He is smiling slightly and holding a white mug with both hands. The background is a bright, out-of-focus indoor setting with large windows.

Komfortable und diskrete Versorgung für Tag und Nacht

Qufora® Beinbeutel

Die Qufora Beinbeutel haben eine Vielzahl an positiven Merkmalen und sind in verschiedenen Versionen erhältlich, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.


Die Qufora Beinbeutel bieten:

- ▶ einen kürzbaren Schlauch, um die Länge individuell anpassen zu können,
- ▶ einen flexiblen jedoch stabilen Schlauch mit samtiger Oberfläche für ein angenehmeres Tragen,
- ▶ eine eingebaute Rückflusssperre, um Infektionen durch aufsteigende Bakterien zu verhindern,
- ▶ eine transparente und kräftige Beutelfolie mit Skalierung zum Einschätzen des Füllvolumens,
- ▶ ein Mehrkammer-System, damit der Beutel auch in gefülltem Zustand flach und diskret bleibt,
- ▶ eine weiche Textiltrückseite, die Hautreizungen vorbeugt und den Tragekomfort erhöht,
- ▶ einen Universalkonnektor am Ende des Ablassventils für einen problemlosen Anschluss eines Nachtbeutels,
- ▶ stabile Befestigungsösen, um den Beutel mit Hilfe von Klettverschlussbändern am Bein zu befestigen.

Praktische Einzelverpackung



Leicht bedienbarer Q-Flow Schwenkhahn

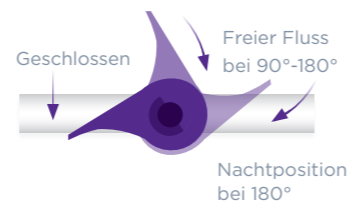

Unsteril

Qufora Beinbeutel mit Q-Flow Schwenkhahn - Mehrkammersystem - Kürzbarer Schlauch

REF	Beutelvolumen	Folienstärke	Schlauchdurchmesser	Schlauchlänge	Positionsnummer	VE
1116 1502	500 ml	0,2 mm	8 mm	50 cm	50741 028	10 St.
1136 1502	750 ml	0,2 mm	8 mm	50 cm	50741 029	10 St.



Steril

Qufora Beinbeutel mit Q-Flow Schwenkhahn - Mehrkammersystem - mit nadelfreier Urinprobenentnahmestelle

REF	Beutelvolumen	Folienstärke	Schlauchdurchmesser	Schlauchlänge	Positionsnummer	VE
1216 1602	500 ml	0,2 mm	8 mm	25 cm	50740 021	10 St.
1216 1502*	500 ml	0,2 mm	8 mm	50 cm	50740 022	10 St.
1236 1502*	750 ml	0,2 mm	8 mm	50 cm	50740 023	10 St.



Unsteril

Qufora Klettverschlussbänder

REF	Ausführung	Positionsnummer	VE
2110 0301	Zwei Klettverschlussbänder mit Antirutsch-Silikonstreifen auf der Rückseite und zwei Knöpfen zum Befestigen des Beinbeutels, Breite 3 cm, Länge 60 cm	50774 013	10 St.



*inkl. zweitem Konnektor

Qufora® Bettbeutel

Die Qufora Bettbeutel zeichnet ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis in Verbindung mit interessanten Ausstattungsdetails aus.

Die Qufora Bettbeutel bieten:

- ▶ einen gestuften Konnektor, der mit wenig Kraft zuverlässig am Katheter angeschlossen werden kann,
- ▶ einen langen und flexiblen Anschlusschlauch, der einen ungehinderten Abfluss und ein flexibles Anbringen des Bettbeutels am Bett sicherstellt,
- ▶ eine eingebaute Rückflusssperre im Beutel,
- ▶ eine Skalierung zum Einschätzen des Füllvolumens.

Schiebehahn



Schwenkhahn



Unsteril

Qufora Bettbeutel mit Free-flow Schiebbehahn

REF	Beutelvolumen	Folienstärke	Schlauch-durchmesser	Schlauch-länge	Positionsnummer	VE
1385 0301	2000 ml	0,12 mm	6,5 mm	130 cm	50744 018	10 St.



Steril

Qufora Bettbeutel Premium mit Ablassventil und Urinprobeentnahmestelle

REF	Beutelvolumen	Folienstärke	Schlauch-durchmesser	Schlauch-länge	Positionsnummer	VE
1485 1201	2000 ml	0,2 mm	10 mm	120 cm	50743 017	25 St.



Unsteril

Qufora Bettbeutelhalter

REF	Ausführung	Positionsnummer	VE
2110 0101	Halterung, um Beutel am Bett zu fixieren	50778 012	5 St.



Qufora® Urinbeutel für geschlossene Systeme

Bei der dauerhaften Urinableitung ist das Risiko für Harnwegsinfektionen groß. Die Anwendung eines geschlossenen Urinbeutelsystems kann dieses Risiko reduzieren.

Die Qufora® Urinbeutel für geschlossene Systeme bieten:

- ▶ einen rückwärtsgestuften Konnektor, der eine gute Verbindung zwischen Bettbeutel und Katheter sicherstellt,
- ▶ eine nadelfreie Urinprobenentnahmestelle, die Nadelstichverletzungen verhindert,
- ▶ eine Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre, die den Urin tropfenweise in den Beutel laufen lässt, einen Urinrückfluss verhindert und aufsteigenden Infektionen vorbeugt,
- ▶ BelüftungsfILTER in der Tropfkammer und im Beutel für einen permanenten Druckausgleich und beste Fließigenschaften,
- ▶ eine Einsteckflasche, um den Ablasshahn zu fixieren.

Tropfkammer



Konnektor mit Urinprobenentnahmestelle



Steril

Qufora Bettbeutel für geschlossene Systeme - mit Schwenkhahn

REF	Beutelvolumen	Folienstärke	Schlauchdurchmesser	Schlauchlänge	Positionsnummer	VE
1682 3201	2000 ml	0,2 mm	10 mm	130 cm	50742 016	20 St.



Steril

Qufora duo Bein- und Bettbeutel für geschlossene Systeme - Q-flow Schwenkhahn

REF	Beutelvolumen	Folienstärke	Schlauchdurchmesser	Schlauchlänge	Positionsnummer	VE
1256 1001*	1000 ml	0,2 mm	9 mm	90 cm	50745 015	20 St.



*inkl. zweitem Konnektor

Einsteckflasche Bettbeutel



Einsteckflasche Duo Bag



Steril

Qufora Katheterventil mit Q-Flow Schwenkhahn

REF	Produkt	Positionsnummer	VE
2110 4201	Qufora Katheterventil mit Q-Flow Schwenkhahn	50772 020	30 St.



Ihr Fachhandelspartner in der Region

010223_AT

Ihr Herstellervertreter in Österreich

GEORG EGGER PRODUKTMANAGEMENT

Georg Egger & Co GmbH, Kapellenstraße 105, A-8053 Graz

Tel: +43 (0) 316 71 51 68, Fax: +43 (0) 316 71 51 68 66

www.georgegger.at/qufora



Hersteller: Qufora A/S, Gydevang 30, 3450 Allerød, Dänemark Qufora® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Qufora A/S. ©01/2023. Alle Rechte vorbehalten, Qufora A/S, 3450 Allerød, Dänemark.